



飞莫家用水光仪 II

产品使用说明书

感谢您购买飞莫家用水光仪 II

使用前,请务必仔细阅读本使用说明书,按照说明书指示,正确安全地使用。

关于飞莫家用水光仪 II

飞莫家用水光仪 II 将为您带来全新的智能护肤体验。它能够在不损伤肌肤的情况下,快速地打开肌肤吸收的通道,加快营养成分的有效吸收,通过定制个性化护肤方案,令您的肌肤水润饱满,精致弹润。以下我们将为您展示全新的飞莫家用水光仪 II,让您对它有全面的了解。



有效深透:快速打开肌肤吸收的通道,促进营养成分深入肌肤底层,发挥作用。



精准覆盖:采用高于行业标准的7x7mm规格纳米晶头,接触面积更大,轻松触达到每寸肌肤。



温和护理:纳米的直径仅为头发丝的千分之一,经过精微纳米加工技术制造而成的晶片,其针尖控制在直径100nm以下,高度130um以下,打开肌肤吸收通道的同时做到不伤肤。



材质可靠:本品使用的单晶硅材质纯度高达99.999%,无铅无汞,保证使用的安全性。



彩光护肤:高纯度红色光子,增加肌肤弹性。高纯度蓝色光子,缩小毛孔,令您的肌肤弹润紧致。红蓝综合光子高效护肤,多种功效,切合您的多种需求。



人性设计:真空瓶装精华液,确保精华营养活性,精密设计,精华打出更均匀,深透更有效。内置智能红外线距离感应系统,机器只有在靠近肌肤时才开始功能运作,操作更加简单节能。



精准识别:NFC芯片智能识别精华,启动定制化程序对应不同精华,感应启动无需多重选择。



智能交互:蓝牙连接小程序,轻松查阅使用记录,让您的美丽轨迹看得见。




简单便携:双键切换模式,操作简单,快速上手,机身小巧,便于携带,外出也能轻松享受水光护理。




盒式充电:配套收纳盒内配有充电功能设计,让日常充电与出行携带变得更为简易。


机 体

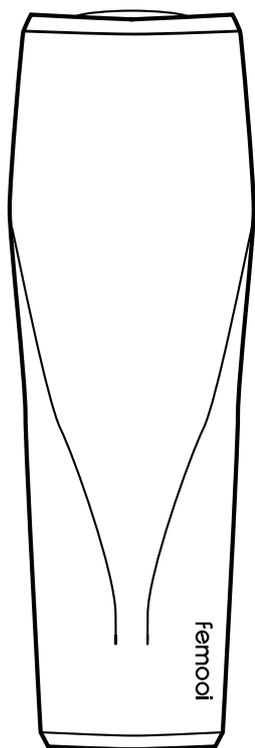


正视图

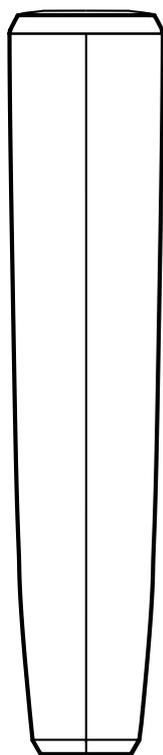

侧视图

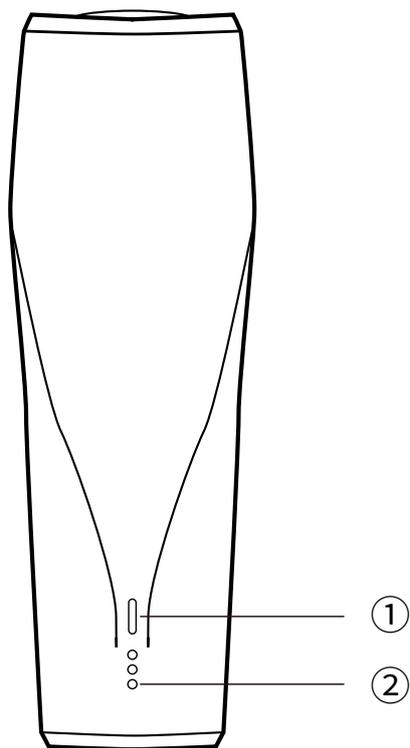


背面视图

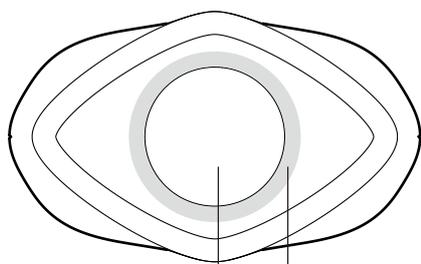

③ ④

顶部套筒

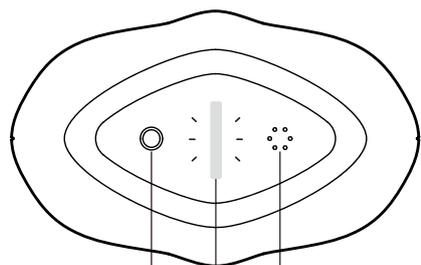


⑤ ⑥ ⑦


底部操作区域

- ① 出音口
- ② 触点式充电接口
- ③ 精华液瓶安装槽
- ④ 彩色光子灯
- ⑤ 水光键（开关键）
- ⑥ 指示灯
- ⑦ 光疗键


充电收纳盒

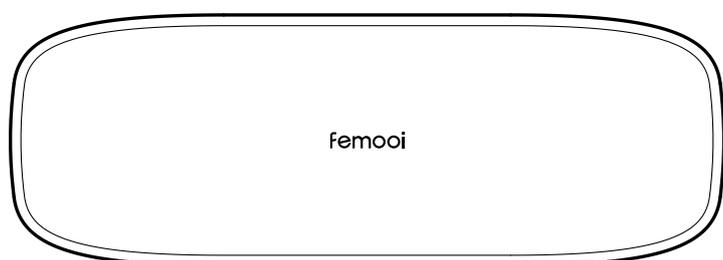


顶视图

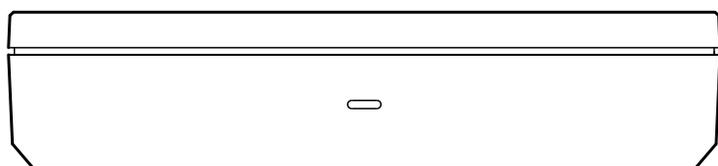


正视图

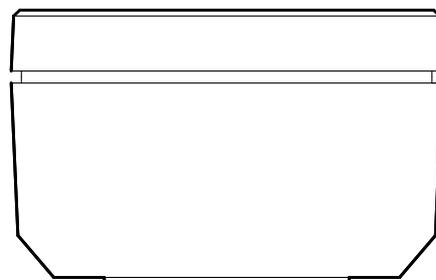

侧视图

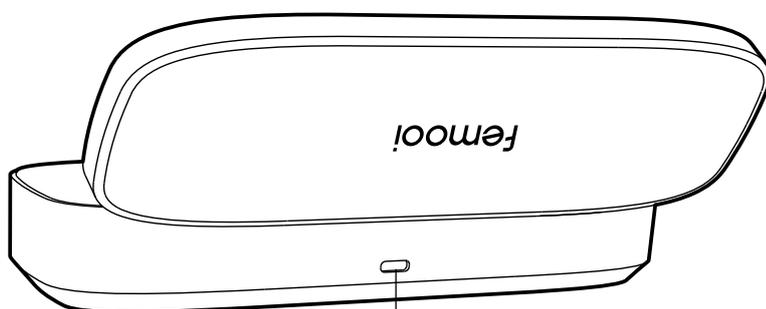

④

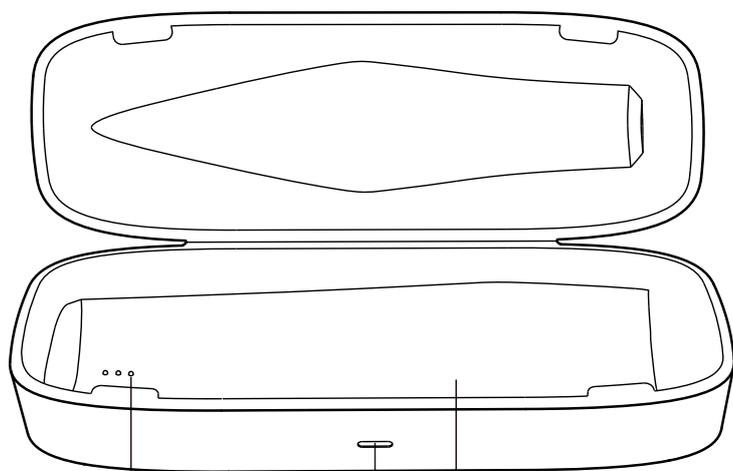

①

②

③


① 触点式充电接口

② 充电指示灯

③ 机体放置槽


④ 收纳盒充电线接口

二代智能精华液瓶

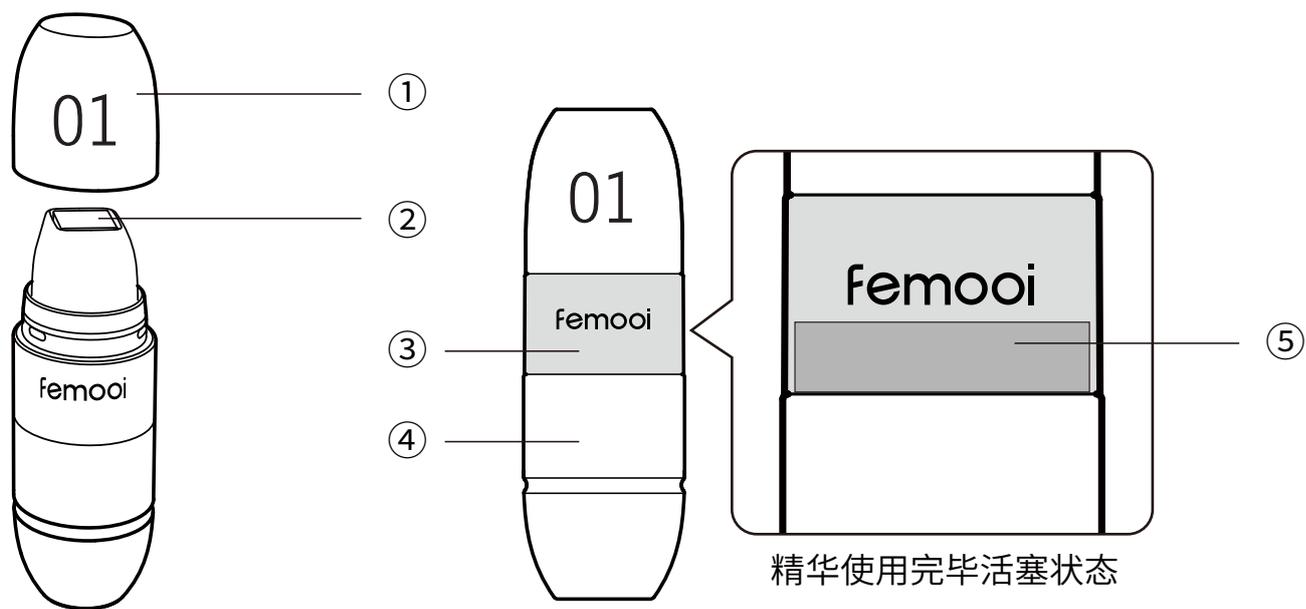


- ① 瓶盖
- ② 纳米晶头
- ③ 精华半透可视环
- ④ 精华液腔
- ⑤ 内部活塞

其他配件

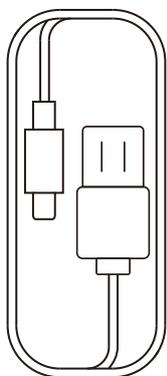


Type-c充电线

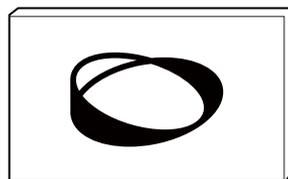


快速使用指导卡

精华液瓶安装图

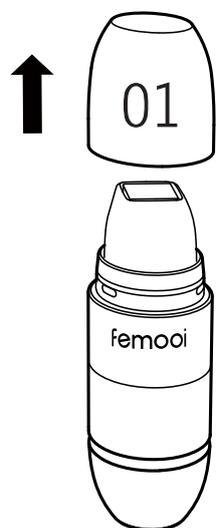

1. 拔开精华液瓶

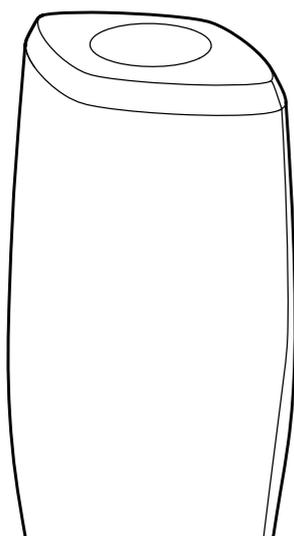

2. 在机器开机状态下，将精华液瓶向下垂直插入安装槽中，精华瓶安装到位时，会有轻微的卡紧感，同时机器会发出对应指示音

使用指南

在开始使用前,请您了解以下重要信息:

- 使用前,请为您的飞莫家用水光仪 II 充电直至满电状态,如何充电请参见下文“充电”介绍。
- 操作前,作用部位和手部,都需清洁干净。
- 初次使用请激活设备并完成蓝牙连接。微信扫描充电盒背面二维码激活设备并按提示连接手机蓝牙。
- 小程序提供专业的肤质自检,您可前往进行检测并根据结果选择更合适您的护理方案。
- 您可在每次护理完之后通过小程序查看完善您的使用记录。
- 我们建议每周使用1-2次水光针对面部进行护理,2次使用之间至少间隔二天,您也可以根据自己的肌肤状态和检测结果调整使用频率,睡前使用最佳,以便休息时更好的吸收。
- 水光模式使用过程中,同一部位停留时间不超过3秒且次数不超过3次。
- 如果精华液瓶一次性包装不完整有破漏,请勿使用,以免造成皮肤污染。
- 精华液使用殆尽,瓶内活塞会上升至精华瓶透明圈上femooi logo底部(见精华瓶),方便您随时确认精华是否使用完毕。
- 同一精华液瓶仅供一人一次使用,严禁与他人共用一枚,严禁同一精华液瓶消毒后多次使用,否则可能会引起皮肤过敏、红肿、斑点、炎症等不良后果。
- 水光模式使用过程中,请保持适度用力,避免过度按压。如出现按压过度的情况,机器会自动停止运作,减轻力度即可恢复正常使用。
- 水光模式使用完毕,请及时将精华液瓶取下,并对精华液瓶安装槽进行清洁。
- 水光仪 II 内置声音提醒系统,彩蛋模式下,在特定节日里提示音会转换成相应风格,您也可以在小程序里取消此模式。

特别说明

- 皮肤脆弱时期,如发红、发痒、发烫、皮肤红肿、集中爆痘时,不建议使用。
- 接受过填充注射手术或类似治疗(短期内)、皮肤炎症、怀孕、哺乳期人群不建议使用。
- 首次使用前,建议在手背或耳后结合精华液做皮肤测试,若出现严重瘙痒红肿等过敏现象,请勿使用。
- 水光仪使用后,部分人可能会有皮肤泛红现象,这属于正常现象,一般无需处理,24小时内可自行消失也可按需进行冰敷加速恢复。
- 精华液使用后,部分人可能会有皮肤轻微发痒刺痛现象,属正常现象,一般无需处理,24小时内可自行消失。

功能模式

长按水光键  1.5秒可对水光仪 II 进行开启与关闭操作。水光仪 II 开启时,伴有开机音乐,指示灯长亮;关闭时,伴有关机音乐,指示灯灭。

水光仪 II 在开机状态下即可安装二代智能精华瓶直接进行使用,水光仪 II 内置智能感应芯片能对不同的精华进行识别,并发出对应指示音与指示灯光,我们已为您设置好最适合的档位以及模式,识别完成后直接使用即可。水光仪 II 也可搭配一代精华瓶使用,但无法对其进行智能识别,开机插入精华后,您可直接操作按键选择合适您的档位进行使用。

短按水光键  对水光模式进行档位调节。水光模式共空档、低强度、中强度、高强度四个档位可供用户选择,每短按一下水光键  便可调整到下一个档位,可循环操作,与此同时机器发出相应档位的提示音,指示灯闪一下。

短按光疗键  对光疗模式进行档位调节。光疗模式共空挡、蓝光、红光、红蓝综合光四个档位可供用户选择,每次短按一下光疗键  便可调整到下一个档位,可循环操作,同时伴有按键音,指示灯闪一下。

温馨提示

- 水光模式和光疗模式可同时使用,同时使用时可提高效率,增强疗效。
- 二代精华支持定制化参数设置,您可在小程序上调整每种精华的使用参数,设置保持后,下次使用同种精华时,水光仪 II 会自动匹配相应的参数供您使用。
- 水光仪 II 的声音设置可以通过小程序进行调整。

注意:

- * 刚开封的二代智能精华液瓶请先在手背或耳后适度按压3-5下,直至精华液溢出再进行面部使用
- * 水光仪 II 通过智能红外感应系统触发运作,所以只有当仪器感应到皮肤靠近时才会启动运作
- * 水光仪 II 在使用过程中会每隔1分钟短鸣一声,提醒您适度使用
- * 为避免过度使用,水光模式每次默认的运行时间为10分钟,之后主机短鸣一声提醒模式结束并停止震动导入
- * 为避免过度使用,光疗模式每次默认的运行时间为10分钟,之后主机短鸣一声提醒模式结束,光源自动熄灭
- * 水光仪 II 在开机后,若无任何操作则5分钟后自动关机
- * 只有在水光仪 II 激活和连接后,才能在向程序上对其进行设置进行修改

详细使用步骤



STEP1: 清洁脸部。



STEP2: 长按水光键  1.5秒打开机器,按照“精华液瓶安装图”指示安装二代智能精华液瓶,安装完成后听到识别完成指示音后即可按照默认或个性化设置开始使用;开始后请先在手背或耳后适度按压3-5下,直至精华液溢出再进行面部使用。

如需调节水光模式的档位和光疗模式,可分别通过按下水光键  和光疗键  来选择所需档位与模式,具体操作请参见“功能模式”介绍。

使用时,针口垂直接触于皮肤表面,可以目测到有轻微凹陷感,快速、密集、轻柔地盖章式上下一按一提。根据接触部位不同,力度有所调整。



STEP3: 护理完成后请静待片刻,让肌肤吸收多余精华,之后建议搭配使用修护产品,关机后使用干净柔软的布擦拭机器头部及内侧精华仓,并及时充电。

注意:


- * 请根据个人皮肤状态进行操作,避免过度使用。
- * 先开启机器,再安装精华液瓶。
- * 开启机器后,请先确保精华瓶安装到位。安装到位时,会听到精华识别完成的指示音。
- * 水光模式使用手法为在面部快速、密集、轻柔地盖章式一按一提,切勿重压,拖拽和打圈式操作。
- * 水光模式和光疗模式同时使用效果更佳,除了面部以外也可对颈部进行护理。
- * 使用时力度要适中,精华能均匀溢出即可,请勿有意按压,也无需有意提腕致晶片不能均匀接触肌肤。
- * 使用过程中请保持适度按压,机器产生连续均匀的震动即可,过度按压容易导致机器进入保护机制从而卡死。低强度状态下机器更为灵敏,请注意力度控制。
- * 导入眼周区域时请格外小心,切勿使产品直接接触眼睑或眼部。
- * 建议初次使用用户与敏感肌用户从低强度档位进行导入,待肌肤完全适应后再根据肌肤状态尝试其他强度。
- * 使用过程中或结束后如觉皮肤干燥,可适当进行补水。
- * 靠近眼部时,如觉亮度过强,请紧闭眼睛或佩戴遮光眼罩。
- * 使用过程中机体轻微发热属于正常现象,如外壳过热应立即停止使用。

警告:

- * 如果您在使用飞莫家用水光仪 II 时有任何不适,请立即停止使用并咨询医师。

充电

您的飞莫家用水光仪 II 可通过充电收纳盒进行充电。从无电量状态直至充满电大约需要3小时。当电池电量过低时, 机器的指示灯将变红, 请尽快为机器充电。

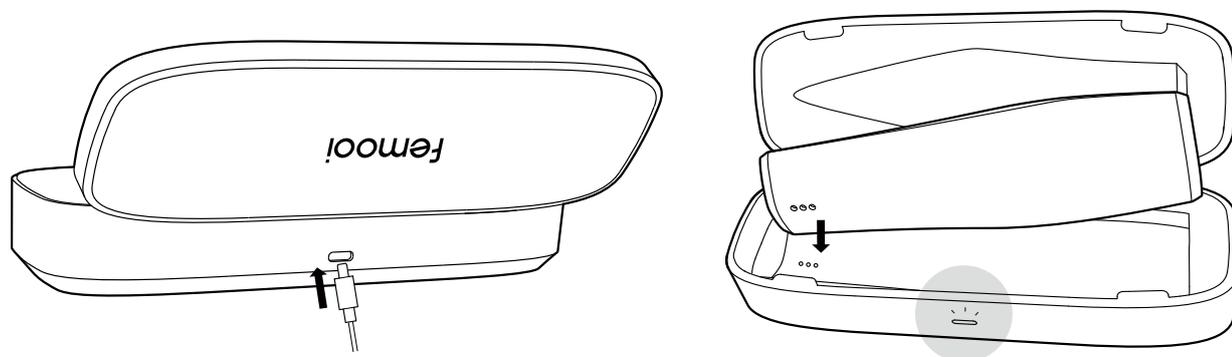

- 水光仪 II 自带一条充电线, 充电时将底座充电线一端的type C接口插入充电收纳盒后端的充电线接口, 另一端USB接口插入您的适配器内。将水光仪 II 机体背部的触点式充电接口对准充电收纳盒内的触点式充电接口, 平放入机体放置槽中, 充电收纳盒的指示灯亮起并按呼吸频率闪烁时, 表明电池正在正常充电。充电结束, 指示灯光由呼吸闪烁变为稳定亮起。

警告:

- * 充电前, 请确保充电线接口干燥无水, 并检查所标识电压与适配器电压是否相符。
- * 请勿在有浸水可能性的地方充电。
- * 请务必将机器摆放到位, 不然可能无法充电。

维护

请您妥善维护飞莫家用水光仪 II, 让其保持最佳的工作状态

- 每次使用完毕, 请及时将精华液瓶取下, 请用干净柔软的布擦拭机器头部及内侧精华仓, 并拭干。
- 请用柔软的布或毛巾擦拭充电底座。
- 请勿使用含酒精、汽油或丙酮等清洁产品清洁机体, 这些物质可能会刺激肌肤。
- 请勿将飞莫家用水光仪 II 置于酸性、碱性液体中
- 请勿将飞莫家用水光仪 II 投入洗碗机、微波炉或高压容器中, 否则可能造成事故或导致受伤。
- 请勿水洗飞莫家用水光仪 II 机体。
- 该设备不能浸入水中。
- 请避免高温照射、受潮、重压和冲击。
- 请将产品放置在儿童接触不到的地方, 以防发生危险。
- 请不要在电视机、收音机等电器附近使用。
- 请不要在产品充电时使用。

- 请在飞莫家用水光仪 II 处于低电量状态时,及时为其充电,以延长电池使用寿命。
- 请使用飞莫家用水光仪 II 原装配套的充电收纳盒进行充电。
- 请勿自行拆解、改造、修理。
- 请只使用产品在本说明书中的特定用途。

常见问题解答

以下列出了关于飞莫家用水光仪 II 最常见的问题。如果您无法找到您的问题的答案,请拨打客户服务热线,了解更多信息。

放入机器,连接上充电线后充电收纳盒的指示灯不闪烁

- 飞莫家用水光仪 II 机体没有正确放入充电底座。
- 飞莫家用水光仪 II 充电收纳盒充电线或电源插头未连接好。

按下功能模式按钮后飞莫家用水光仪 II 没有相应反应

- 处于关机状态。请长按开机键1.5秒进行开机。
- 电池无电。请及时充电。
- 红外线感应器没有感应到物体。请贴近脸部使用。

蓝牙无法连接到手机

- 飞莫家用水光仪 II 处于关机状态。请长按开机键2秒进行开机。
- 飞莫家用水光仪 II 没有激活。请微信扫描充电盒背面二维码激活设备并按提示连接手机蓝牙。
- 手机蓝牙未开启。请打开手机蓝牙。
- 手机与机器距离过远。请靠近连接。
- 微处理器出现短暂性功能故障。请重启。
- 未授权微信蓝牙权限。请增加授权。

开机安装智能精华瓶后飞莫家用水光仪 II 没有工作

- 电池无电。请及时充电。
- 机器未能正常识别智能精华瓶。请检查精华液瓶底部与机体精华液瓶安装槽之间是否存在脏污并重新正确安装智能精华瓶。
- 红外线感应器没有感应到物体,请贴近脸部使用。
- 按压太过用力,机器出于保护设置停止工作。重新安装精华瓶即可。

识别精华瓶或按下功能模式键后飞莫家用水光仪 II 在未靠近肌肤的情况下直接开始功能运作

- 红外线感应器感应到其他物体存在。请确保仪器头部附近50cm范围内无其他物体。
- 红外线感应器外侧沾染污渍。请清洁后再试。
- 微处理器出现短暂性功能障碍。请重启。

弃置

弃置产品时, 请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起, 而应送入合适的电器和电子设备回收收集站处理。合理回收有助于节约自然资源, 恰当的处理本产品可防止废旧产品对环境的污染和对人类健康的侵害。

产品规格

产品名称: 飞莫家用水光仪 II

产品型号: FH2.0

产品材质: 高强度聚碳酸酯

产品颜色: 星云色

主机尺寸: 171*58*35mm

主机重量: 158g

充电盒尺寸: 199*71*46mm

充电盒重量: 188g

充电盒额定输入: DC5V 1A

仪器额定电压: 3.7V

仪器功率: 2.4W

电 池: 锂离子电池1500mA

充电时间: 3小时

界 面: 二个按键、1个指示灯

制造商名称: 宁波科创制造技术开发有限公司

制造商地址: 宁波市鄞州区高新区星光路211号1号楼6#门三楼。

执行标准: GB4706.15-2008

GB4706.1-2005

免责声明:飞莫和经销商对消费者因自身不当使用产品,直接或间接造成的任何自身或第三人身体或非身体的损害的,不承担任何责任,该责任由消费者自身承担。此外,随着产品迭代,飞莫保留修改本说明并随时更改内容的权利,飞莫会将更新的内容通过飞莫官网“www.femooi.com”及飞莫微信公众号“femooi飞莫”推送等方式公布,您可以通过关注飞莫微信公众号来了解最新内容。在法律范围内,飞莫保留最终解释权。

注意:产品模型可能会因改进而有变化,恕不另行通知。

©2021 菲莫科技版权所有。

飞莫(中国):宁波菲莫智能科技有限公司

地址:宁波江东北路375号丰庭楼8楼

中国大陆地区客户服务热线:400-800-8681

www.femooi.com